

Safe Ear Curettes™

Les Safe Ear Curettes de Bionix® permettent aux professionnels de santé d'éliminer, en toute sécurité et délicatement, le cérumen avec des embouts de styles adaptés aux différents types de cire et selon leurs préférences personnelles.



PROBLÈME

Les curettes en acier inoxydable dures et rigides causent douleur et gêne aux patients, et peuvent facilement endommager le conduit auditif ainsi que la membrane tympanique.

SOLUTION

Les Safe Ear Curettes de Bionix sont flexibles et permettent de réduire les lésions au conduit auditif, ce qui en fait une solution plus sûre que les curettes en acier inoxydable.

RÉSULTATS

Sept styles d'embout codés par couleur pour répondre aux besoins spécifiques, vous offrant ainsi « l'outil adapté à chaque procédure » selon le type de cérumen.

« J'utilise les curettes auriculaires Bionix depuis mes études médicales postdoctorales. Pour moi, elles sont incontournables. » - Sidney Shah, MD

REMBOURSEMENT POTENTIEL (ÉTATS-UNIS UNIQUEMENT)

Code CPT/Description

69210 - Pour remboursement potentiel des bouchons de cérumen.



SINGLE
USE ONLY



MADE IN
THE U.S.A.



Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Bruxelles, BELGIQUE
Tél. : +(32) 2.732.59.54 • Fax : +(32) 2.732.60.03 • E-mail : mail@obelis.net



Bionix LLC • 5154 Enterprise Blvd. Toledo, OH, 43612, États-Unis
Tél. : +1 419.727.8421 • Fax : +1 800.455.5678 • www.Bionix.com



DES SOLUTIONS INNOVANTES AUX PROBLÈMES QUOTIDIENS

+1 800.551.7096 • www.bionix.com

©2021 Bionix LLC | INTL-0045-FR | Rév. A

Safe Ear Curettes™

PRÉSENTATION DU PRODUIT

ADULTE

CeraSpoon® jaune | N° 6333
La curette CeraSpoon jaune est parfaite pour la cire tendre, notamment chez les patients qui produisent une quantité excessive de cérumen. **4mm**

ControLoop® orange | N° 2999
La curette ControLoop orange comporte un embout fléchi de style « Shapleigh » qui permet d'extraire la cire directement du conduit auditif. **4mm**

AngleLoop® rouge | N° 3444
La curette AngleLoop rouge comporte un embout incliné qui permet d'accéder facilement au cérumen tenace et difficile à atteindre qu'on trouve habituellement chez les patients âgés. **4mm**

GÉNÉRAL

FlexLoop® blanche | N° 9555
La curette FlexLoop blanche est une curette polyvalente conçue pour le curetage normal chez divers patients. **4mm**


JEUNES

VersaLoop® mauve | N° 4111
La curette VersaLoop mauve comporte un embout souple et flexible qui permet à l'utilisateur d'avoir un contrôle exceptionnel tout en offrant au patient plus de confort. **3mm**

InfantScoop® bleue | N° 4888
La curette InfantScoop bleue est conçue pour les petites oreilles et peut être utilisée à travers un otoscope. **2mm**

MicroLoop® verte | N° 1222
La curette MicroLoop verte se caractérise par une construction plus rigide et est conçue pour éliminer les bouchons de cérumen tenaces. **3mm**

MODE D'EMPLOI

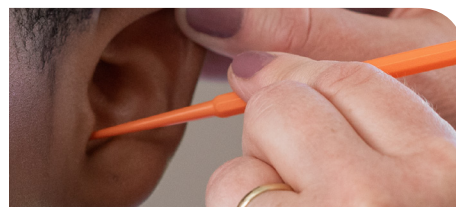

CURETAGE NORMAL

1. Déterminer l'emplacement du cérumen avec un otoscope.
2. Choisir la curette adaptée selon le type de patient et de cérumen.
3. Placer la curette à l'intérieur du conduit auditif et éliminer le cérumen.
4. Répéter l'examen à l'otoscope et déterminer l'emplacement de tout résidu de cérumen.



CURETAGE AVEC OTOSCOPE

1. Déterminer l'emplacement du cérumen avec un otoscope.
2. Choisir l'une des curettes Safe Ear Curettes™ pour jeunes patients.
3. Glisser la loupe de l'otoscope sur un côté.
4. Placer la curette dans l'otoscope et éliminer le cérumen.

« Grâce aux diverses tailles et formes d'embouts, l'élimination du cérumen est plus facile que jamais. » - Carl A. Moritz, Jr., MD

BIONIX®, CeraSpoon®, FlexLoop®, InfantScoop®, MicroLoop®, AngleLoop®, VersaLoop® et ControLoop® sont des marques déposées. Safe Ear Curettes est une marque de commerce de BIONIX

Brevetées - The ControLoop, CeraSpoon, VersaLoop, FlexLoop, InfantScoop et AngleLoop.



DES SOLUTIONS INNOVANTES AUX PROBLÈMES QUOTIDIENS

+1 800.551.7096 • www.bionix.com